

ブランド		バトラー						
型番		#200	#211	#311	#025NEO(S)	#025NEO(M)	#244	#233
ヘッド部	大きさ・ 種毛例							
	列	3	3	3	3	3	3	3
	行	7	8	11	7	7	7	8
	タフト数	21	24	31	20	20	21	24
	幅(最大部)(mm)*1	8.5	9	9.5	8.4	8.4	8.5	9
用毛	厚さ(最大部)(mm)*1	5	5	5	2.5	2.5	5	5
	毛切形状	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット
	毛先の種類	テーパーード	テーパーード	テーパーード	テーパーード	テーパーード	テーパーード	テーパーード
	フィラメントの種類	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン
	毛丈(最大部)(mm)*1	9	9.5	9.5	9	9	9.5	9.5
太さ(mm)		0.20	0.20	0.20	0.15	0.19	0.15	0.13
毛のかたさ(使用感の目安)*2		ふつう	ふつう	ふつう	やややわらかめ	ふつう	やわらかめ	やわらかめ
ハンドル部	ハブラシ全長(mm)	162	162	162	180	180	162	162
	カラー	6色	6色	4色	4色	4色	6色	6色
	内装入り数(本)	12	12	12	12	12	12	12
患者様希望価格(税抜)/本(円)		300	300	300	300	300	300	300

ブランド		ガム・プロズ					
型番		#3C	#4WR	RS-S	RS-M	R-3M	R-3H
ヘッド部	大きさ・ 種毛例						
	列	3	4	3	3	3	3
	行	8	8	7	7	7	7
	タフト数	22	30	20	20	20	20
	幅(最大部)(mm)*1	9	12	7.5	7.5	9.5	9.5
用毛	厚さ(最大部)(mm)*1	4	4	4	4	4.5	4.5
	毛切形状	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット
	毛先の種類	先端3本毛	先端3本毛	テーパーード	テーパーード	テーパーード	テーパーード
	フィラメントの種類	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン
	毛丈(最大部)(mm)*1	10.5	10.5	9.5	9.5	9.5	9.5
太さ(mm)		0.17	0.17	0.15	0.20	0.18	0.23
毛のかたさ(使用感の目安)*2		やややわらかめ	やややわらかめ	やややわらかめ	ふつう	ふつう	やややわらかめ
ハンドル部	ハブラシ全長(mm)	180	180	162	162	162	162
	カラー	4色	4色	4色	4色	4色	4色
	内装入り数(本)	12	12	12	12	12	12
患者様希望価格(税抜)/本(円)		300	300	290	290	300	300

*1 幅、厚さ、毛丈は0.5mm単位で記載。*2 毛のかたさ(使用感の目安)は、実際の使用感に基づいた当社独自の測定方法の結果をもとに記載。
画像例は一例で実際は人によって異なる場合があります。

商品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-1195
大阪府高槻市朝日町3番1号 TEL:072-682-4733

めざせ!!

ハブラシ コンシエルジュ

臨床症例編



ハブラシ

フローチャート

患者さんの症状に合ったハブラシを
3ステップで処方しましょう。

Step 1

歯肉の
炎症の程度

なし

軽～中

中～重

Step 2

根面
露出

なし

あり

Step 3

プラーク
(歯垢)の
付着

白歯部
全体

特に

ブラッシング
スキルが
高い患者さん

超極薄ヘッド

P6

バトラーハブラシ
#025NEO(S)、
#025NEO(M)

ナイロン

テーパード

TBIに適した基本設計

P5

バトラーハブラシ
#200、#211

ナイロン

テーパード

ガム・プロズデンタルブラシ
RS-S、RS-M

超極薄ヘッド

テーパード

歯肉への当たりがやさしい

P8

P9

ガム・プロズデンタルブラシ
#3C、#4WR

ナイロン/
超極薄ヘッド

先端3本毛

やわらかい毛の設計

P7

バトラーハブラシ
#244、#233

ナイロン

テーパード

ワンポイントケア

部分
みがき
には

みがきにくい部位の集中ケアに

P10

バトラーシングルタフト
#01M、#01F

超極薄ヘッド

先丸

イラスワンアイテム

歯間ケア
には

バトラーデンタル
フロス
#850PJ

バトラーイージー
スレッド
フロス


ガム・プロズ
歯間ブラシ字型
(4S～LL)

P11

ハブラシ選択のポイント

ハブラシを患者さんへ処方する場合、皆さんはどのようなポイントで選択していますか？
おそらく、ヘッド・ネック・ハンドルはチェックされていると思います。しかし、これからはヘッドの毛の材質や毛先の加工方法等、さらに細かくチェックしてみてください！

これからは
・毛の材質
・毛先の加工方法
にも注目してみましょう

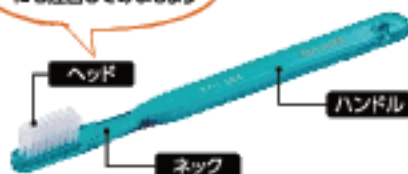

毛の材質

サンスターで使用している毛の材質は大きくわけて**ナイロン**と**飽和ポリエステル樹脂**の2種類です。それぞれの特徴は右表です。

毛の材質	ナイロン	飽和ポリエステル樹脂
材質の特徴	吸水性が大きい	吸水性が小さい
使用感	歯になじむような感覚	パリッとしたような反発力がある感覚

毛先の加工方法

サンスターの歯科用ハブラシでは4種類の加工を採用しています。毛の材質と毛先の加工方法を組み合わせるとハブラシ選択の幅がさらに広がります。いろいろな組み合わせのハブラシを、まずはご自身の口腔内で使用してみましょう！

先丸加工

- 歯肉の状態に自信がある方



毛先をそろえるためカットした際の角張った毛先をグラインダー(やすり)で削って丸く加工したものの

テーパード加工

- 毎日のブラッシングで歯と歯肉の健康を保ちたい方



グラインダーで1本1本の先端を丸く先細にしたものの


先端3本毛加工

- 弱ってきた歯肉が気になる方
- 歯肉の腫れや出血が気になる方
- 歯の根面が出てきた方



1本の毛の先端を3本の細い毛に特殊加工したものの

先端3本毛の加工方法

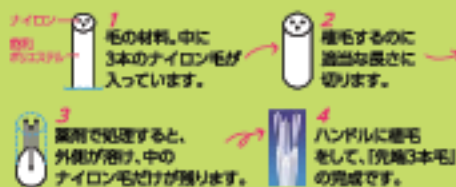

バトラーハブラシ #200

使用感目安
やわらかめ がつめ



ナイロン

こちらもオススメ!
バトラーハブラシ #211

#200より
ヘッドサイズが
大きめ



ガム・プロズ デンタルブラシ RS-S

使用感目安
やわらかめ がつめ



飽和
ポリエステル樹脂

こちらもオススメ!
ガム・プロズデンタルブラシ RS-M

RS-Sより
がつめ



全体的にプラーク(歯垢)の付着があるが、歯周病の傾向はない方
Before



患者さんの背景

- 歯肉は健康な状態で比較的綺麗に見えるが、染め出すと上顎前歯の全面と全顎歯頸部に薄くプラーク(歯垢)が付着している

After



処方後

- とても丁寧にブラッシングされていて、プラーク(歯垢)の付着は歯頸部に少量認められる程度まで改善

* 指導のポイント *

- ハブラシを歯面に90度に当てて、優しく小さく動かすよう指導
- 鏡を見てもらい、歯頸部にも毛先が当たっているか確認しながらみがいてもらう



全体的に歯肉の状態が安定しており、パリッとした使用感を好む方
Before



患者さんの背景

- 歯周病のリスクは低く、う蝕リスクが高い
- 左側にプラーク(歯垢)付着を多く認め、「6」はう蝕治療中である

After



処方後

- 苦手だった左側にも上手くハブラシを当てられるようになり、目立ったプラーク(歯垢)の付着は認めない

* 指導のポイント *

- 染色をして左右の違いに気づいてもらう
- 左側からみがいてもらい、みがき忘れに注意してもらう

バトラーハブラシ #025NEO(M)

使用感目安
やわらかめ がつめ



フラット

ナイロン



最後臼歯にみがき残しが多い方

Before



患者さんの背景

- 口、歯ともに小さい
- 「8」が萌出している
- 歯肉の炎症は認めず、健康な状態
- 大きめのハブラシを使用していてハブラシが上手く歯に当たっていない

After



処方後

- 「7 8」無刺にもしっかりハブラシが当たっていて、プラーク(歯垢)が除去できている

* ハブラシ処方理由 *

- 小さな口でも「8」まで届きやすい極薄ヘッド、かつ歯に合ったサイズのハブラシを選択

* 指導のポイント *

- 「8」や臼歯部の無刺をみがくときにはハブラシが届きやすいよう、口を少し開き気味にするように指導
- 前歯は鏡を見てハブラシを歯にフィットさせてみがくように指導



こちらもオススメ!
バトラーハブラシ
#025NEO(S)

#025NEO(M)
よりやわらかめ



バトラーハブラシ #244

使用感目安
やわらかめ がつめ



フラット

ナイロン



歯肉の炎症があり、
ブラッシングも痛みがある方

Before



患者さんの背景

- 歯肉の炎症が強く、3.1|2 21|12の辺縁歯肉に発赤、腫脹を認める
- 腫脹部位にハブラシを当てると痛いので、この部位をさけてブラッシングしている状態

After



処方後

- まだ軽度の歯肉の炎症を認めるが、発赤や腫脹を認めない
- 歯肉も引き締まってきているため、#3Cにハブラシを変更してもらう

* ハブラシ処方理由 *

- ふつうのかたさのハブラシでは当てると痛い部位にも、優しく当たるやわらかいハブラシを選択
- 1~2週間程度の短い期間のみ使用してもらう

* 指導のポイント *

- ハブラシを歯肉に対して45度に当てて優しく小さく動かすように指導



こちらもオススメ!
バトラーハブラシ
#233

#244より
ヘッドサイズが
大きめ



ガム・プロズ デンタルブラシ #3C

使用感目安
やわらかめ かため



歯肉が弱っている方、
根面露出している方

Before



患者さんの背景

- ブラッシング圧が強い
- 頬側に顕著な歯肉退縮あり
- プラーク(歯垢)の付着は歯頸部と近遠心に多く認められる
- 歯肉に軽度の炎症を認める

After



処方後

- WSD部分はまだ少しプラーク(歯垢)の残存を認めるものの、全体的にプラーク(歯垢)の付着が減少
- ハブラシはストロークを小さく、優しくみがくことを意識されている

* ハブラシ処方理由 *

- ブラッシング圧が強くなる傾向があるため、歯頸部をみがいてもらう際に歯肉に優しく当たる#3Cを選択
- 歯肉に炎症があり、WSDが認められるため

* 指導のポイント *

- 毛先が広がらない程度の方でみがくように指導
- ストロークを小さくすることで近遠心や歯列不正部にも毛先が当たるように指導
- 毛先が磨耗するためハブラシの交換時期に注意してもらう

ガム・プロズ デンタルブラシ #4WR

使用感目安
やわらかめ かため



歯肉が弱っている方、
ブラッシングが不得意な方

Before



患者さんの背景

- バームグリップで把持し、ブラッシング圧が強い
- ハブラシは開封後1ヶ月も経たずに毛先が広がる
- プラーク(歯垢)の付着は歯頸部と近遠心に多く認められる
- 全体的(特に白歯部歯頸部)に炎症があり、歯肉退縮を認める
- 歯肉から出血を認める

After



処方後

- ブラッシングが不得意な患者さんでも、的確なプラーク(歯垢)のコントロールが可能となった
- 今までうまく毛先を当てられなかった歯頸部にも毛先が当たっている

* ハブラシ処方理由 *

- ヘッドが大きくブラッシング圧が分散しやすいので、歯肉にやさしく当たる#4WRを選択
- ブラッシングが不得意な患者さんのため、ヘッドが大きくハブラシが歯面に当てやすい#4WRを選択
- 歯肉に炎症があり、WSDが認められるため

* 指導のポイント *

- ブラッシング圧をコントロールするためバームグリップに変更
- スクラビング法を指導
- プラーク(歯垢)が残しやすい歯頸部にもハブラシの毛先を当ててもら



本症例は海峽歯科医院より提供

バトラー シングルタフト #01M

使用感目安
やわらかめ かため



歯垢
がはスナール効果

シリーズ品

バトラー
シングルタフト
#01S/#01MH



最後臼歯の遠心や歯列不正の部位など
みがきにくい部位の集中ケア



患者さんの背景

- 歯列不正部に大量のプラーク(歯垢)が付着
- コンパクトタイプのハブラシでも当てるのが難しい状態

＊ ハブラシ処方理由 ＊

- 歯列不正部にハブラシでは届かず歯面に当たらないため

＊ 指導のポイント ＊

- 歯列不正部に毛先が当たっているかを、鏡で見て確認しながらみがくように指導



バトラー シングルタフト #01F

使用感目安
やわらかめ かため



歯垢
がはスナール効果

インプラント周囲などの清掃



患者さんの背景

- インプラント体の周囲の清掃

＊ ハブラシ処方理由 ＊

- フラットカットの毛先が広がり、インプラント補綴マージンにヒットするため

＊ 指導のポイント ＊

- 毛先を少し広げるように当てて、補綴マージンを意識してみがくように指導



プラスワン アイテム

歯間清掃具のご紹介

ハブラシによるブラッシングだけでは、歯間部のプラーク(歯垢)は**61%**しか除去できなかったのに対し、デンタルフロスを併用すると**79%**、歯間ブラシを加えると**85%**まで除去できます。

歯間清掃具による歯間部のプラーク(歯垢)除去効果



日歯保研誌48(2):272-277,2005

ハブラシでブラッシングしただけでは、歯間部のプラーク(歯垢)が残ってしまいます。そこで、デンタルフロスや歯間ブラシを使って、歯間部まで清掃するように患者さんにお勧めしましょう。

極細のフィラメントが軽く広がり歯肉溝に入りやすい

1本ずつ切り離せて絡まない

スレッド部 狭い隙間へ挿入するための緑のスレッド部

フロス部 大きな隙間も清掃しやすい白のフロス部

こんな患者さんに
・ブリッジのボンディック部
・インプラント装着者
・矯正装置装着者

バトラー
デンタルフロス
#850PJ
(アンワックス)

バトラー
イージースレッド
フロス

抗菌三角毛で
プラーク(歯垢)を
効率的に除去

ガム・プロス
歯間ブラシ
L字型
(4S~LL)

独自開発の三角毛



※イメージ図