


# ブラッシングレシピ

お口の中をチェックしましょう

年 月 日

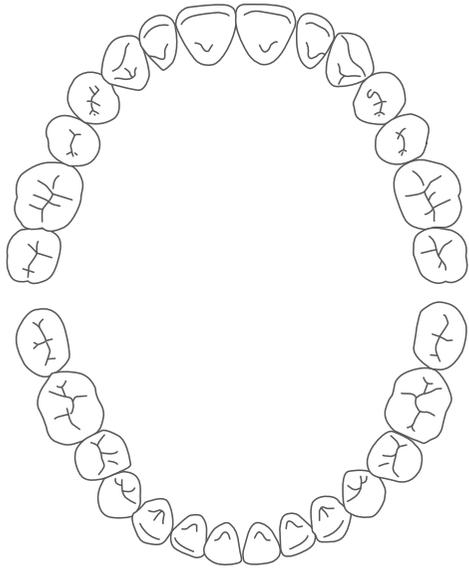

## コメント

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## ✓ポイント

- ◆ 定期的に歯垢染色剤でみがき残しをチェックしましょう。
- ◆ フッ素入りハミガキをつかきましょう。
- ◆ 奥歯をみがくときは、少し口を閉じてみがくとさらにみがきやすくなります。

※当リーフレットではわかりやすくするために、以下の表記しております。 「フッ化物」→「フッ素」

歯科医院取扱品

## バトラー ハブラシ

口腔内状態に合わせて選択できるラインナップ

00

バトラー ハブラシ Bケア S(やわらかめ)



バトラー ハブラシ Bケア M(ふつう)



01

バトラー ハブラシ Gケア



02

バトラー ハブラシ Gケア プラス



商品名	ハブラシの全長	ヘッド部の幅(最大部)	ヘッド部の厚さ(最大部)	フィラメント	タフト数
バトラー ハブラシ Bケア S(やわらかめ)	180mm	8.5mm	2.5mm	テーパード	3列 20タフト
バトラー ハブラシ Bケア M(ふつう)				テーパード	
バトラー ハブラシ Gケア				極細 テーパード	
バトラー ハブラシ Gケア プラス				先端3本毛	

※ヘッドの幅、厚さは0.5mm単位で記載。

歯科医師・歯科衛生士の指導のもとご使用ください。

当医院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市明田町7-1  
お客様相談室

☎0120-008241

®登録商標。BUTLERは登録商標です。



2503SK作成

SUNSTAR

BUTLER

## バトラー ハブラシ

奥までしっかり届く、  
超薄型ヘッドハブラシ



Bケア S

Bケア M

Gケア


Gケア プラス

目的に応じて選べる毛先

## 毎日のブラッシングをサポート

### おすすめの方と毛先の特長

**00** 健全歯肉

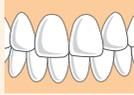

Bケア S 使用感 やわらかい | Bケア M 使用感 ふつふ

ナイロン

しっかり除去

- 健康な歯肉の方
- 白歯部のみがき残しが多い方

**01** 歯肉炎



Gケア 使用感 やわらかい

飽和ポリエステル樹脂

すき間フィット

- 歯肉に炎症がある方
- やわらかいあたりのハブラシが好みの方

**02** 歯肉退縮



Gケア プラス 使用感 やわらかい

飽和ポリエステル樹脂/ナイロン

やさしいあたり

- 歯肉退縮が気になる方
- 知覚過敏症状が気になる方




※写真はBケア Mの毛先

テーパード毛  
細部までしっかり  
プラークを除去



極細テーパード毛  
すき間にフィットし軽い力で  
プラーク除去

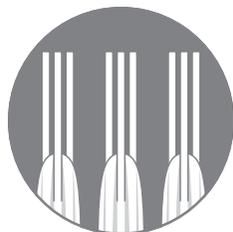

先端3本毛  
超極細の3本に分かれた形状で  
歯面・歯肉にやさしくあたる

口腔内状態に合わせて選択


## 超薄型ヘッドだから、狭い部分まで毛先が届く

### バトラーハブラシのおすすめポイント

#### POINT 1


狭くみがきにくい部位へもスムーズに届く  
薄さ2.5mmの超薄型ヘッド

写真の部分にハブラシをあててみてください。  
ヘッドの薄さを実感できます！

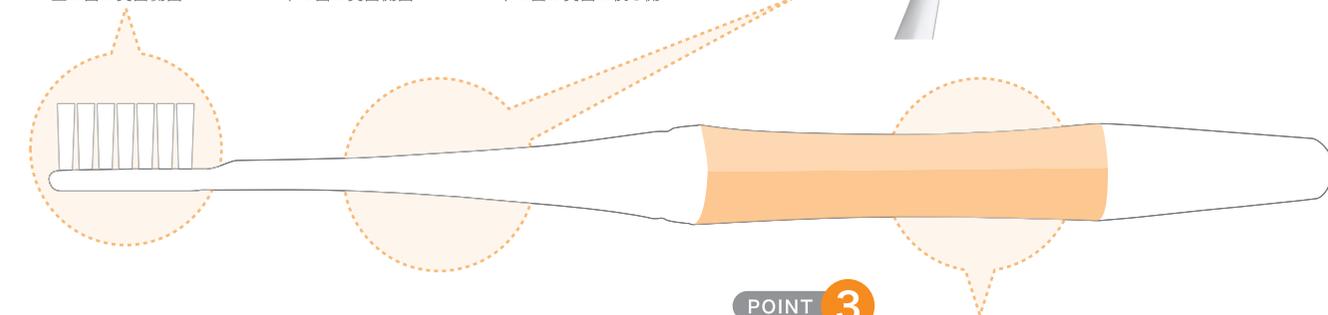

#### POINT 2

奥歯にもスムーズに到達する  
スリムロングネック

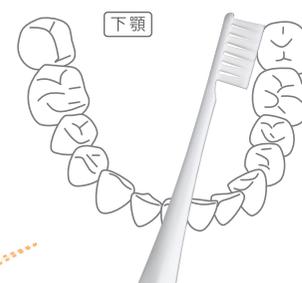

ネックが長く、スリムであるため、口腔内の奥までスムーズにヘッドが届きます。

#### POINT 3

握りやすい六角形なので  
ペングリップでもパームグリップでも  
持ちやすいハンドル設計

ペングリップ時にしっかりハンドルを保持でき、パームグリップでも持ちやすい長ささと太さのハンドル設計



ハンドルカラーは4色

