


ブラッシングレシピ

お口の中をチェックしましょう

年 月 日

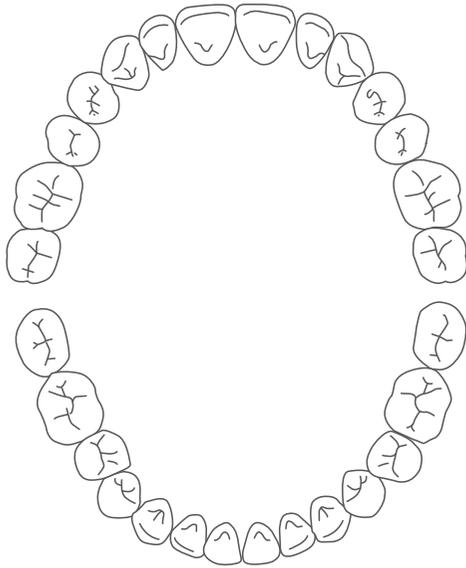

コメント

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

✓ おすすめのシングルタフトは…

- ポイントケア S
 - ポイントケア M
 - ポイントケア MH
 - マージナルケア S
- 

コーンカット



フラットカット

歯科医院取扱品

バトラー タフトブラシ



◎お口の状態に合わせて選べる3つのかたさ

ポイントケア S
(やわらかめ)



ポイントケア M
(ふつう)



ポイントケア MH
(かため)



◎ハンドルカラーは各種共に2色



商品名	毛のかたさ	ヘッド部の幅(最大部)	ヘッド部の厚さ(最大部)
バトラー タフトブラシ ポイントケア S(やわらかめ)	ソフト	6.5mm	9.5mm
バトラー タフトブラシ ポイントケア M(ふつう)	ミディアム		
バトラー タフトブラシ ポイントケア MH(かため)	ミディアム ハード		



◎毛先が開いてやさしくフィットするフラットタイプ

マージナルケア S



※ハンドルカラーは
グレーのみ



商品名	毛のかたさ	ヘッド部の幅(最大部)	ヘッド部の厚さ(最大部)
バトラー タフトブラシ マージナルケア S(やわらかめ)	ソフト	6.5mm	9.5mm

※ヘッドの幅、厚さは0.5mm単位で記載。

歯科医師・歯科衛生士の指導のもとご使用ください。

当医院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市明田町7-1
お客様相談室

☎0120-008241

®登録商標。BUTLERは登録商標です。



2503SK作成

SUNSTAR

BUTLER

バトラー タフトブラシ

いつものブラッシングに加えて
みがきにくい部位を“集中ケア”



ポイントケア S

ポイントケア M

ポイントケア MH

マージナルケア S

ハブラシだけではみがきにくい部位に

集中ケアのポイント

自分にあった
タフトブラシを選びましょう


正しいブラッシングのポイント

1 集中ケアが必要な部位の確認

- お口の中の状態を歯科医院で確認してもらいましょう。
- 鏡を見ながら、ブラッシングしたい部位に毛先が確実にあたっているかを確認してください。


2 ハブラシの持ち方

前歯をみがくとき

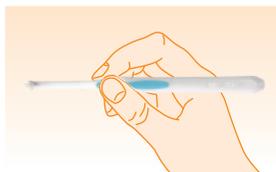

前方を持つと安定して前歯の細かい部分
部分がみがきやすくなります。

奥歯をみがくとき

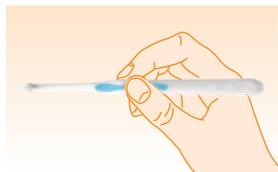

後方を持つと奥歯のみがきにくい部分
にスムーズに毛先が届きます。

3 軽い力でみがく

力を入れずに軽くなぞるように動かします。

ハブラシでは、みがきにくい部位を
集中ケアしましょう

いつも使っている
ハブラシ

タフトブラシ



ハブラシが届きにくい部位に応じて


ブラッシングをサポートします



プラーク(歯垢)のたまりやすい部位

POINT

特に歯と歯の間は狭くてプラーク(歯垢)がたまりやすく、そのうえハブラシではみがきにくい場所。歯間ケア用品で、正しくしっかりみがきましょう。

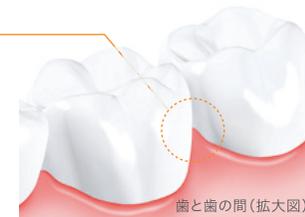

歯と歯の間(拡大図)

みがきにくい部位を集中ケア!

バトラー タフトブラシの特長

届きにくい臼歯・舌側まで無理なく届く反り返りネック

ポイントケア

円錐カット(コーンカット)



歯が重なり合って凹凸になっている部分



歯の詰め物の清掃に使用できます。詰め物と歯肉のすき間を清掃しましょう。



ハブラシの毛先が届きにくい奥歯の清掃に使用できます。また、ラバーハンドルなので滑りにくく、みがきやすくなっています。

マージナルケア

フラットカット



歯の詰め物等の歯頸部へ毛先が広がりやすくフィット



付着歯肉が不足しているインプラント周囲の清掃に適しています。

インプラントの清掃に
お使いいただけます。

